

PC-based 12-Lead Resting ECG

Cardio P1



No Limit in Compact PC ECG Cardio P1

Compact is Convenient

- 직관적이고 간결한 인터페이스: 간편한 PC 연결 가능
- CardioSync: 사용자 중심 UI/UX를 갖춘 PC 소프트웨어 프로그램
- USB 바코드 스캐너로 빠른 환자 ID 입력
- AUTO 키: 간단한 3단계 워크플로 지원
- USB 드라이브 통한 제품 세팅 내보내기/가져오기
- 리드선 연결 및 ECG 신호 상태 자동 감지/알림 기능



Scan for more detail

AUTO key workflow



AUTO




Documentation(문서화)


- ✓ Print out
- ✓ Store
- ✓ Export (Server or USB)

Compact is Complete Solution


- 인쇄 전 미리보기
- 상세 검토 목적 비교/확대/RR 측정 기능
- 최대 30분 전체 공개 (Full disclosure) 기능
(실시간 모드 가능)
- 1, 3, 5, 10, 20, 30분 간격의
Long-term ECG 기록
- 실시간 부정맥 감지 (13종)
- 심박변이도 (HRV) 분석
- 120가지 진단명 기반 자동 판독 기능
- 상세 판독 위한 맞춤형 보고서 제공
(Text, ST segment and map, Guide, Vector)

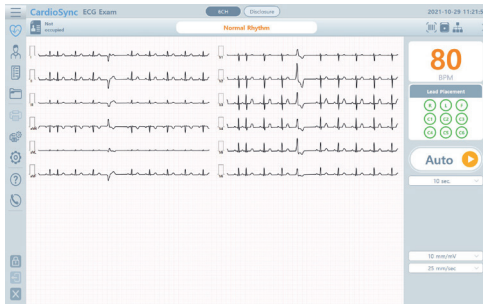


Real-time automatic arrhythmia detection

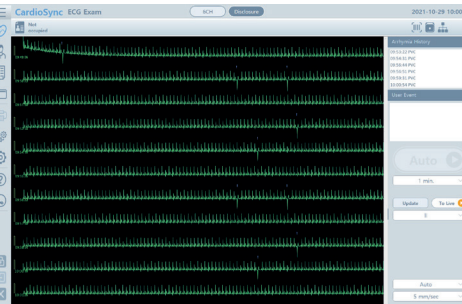


Full disclosure up to 30 min

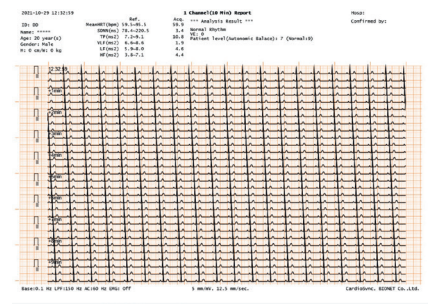


Long-term ECG up to 30 min

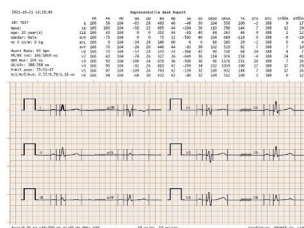


Text

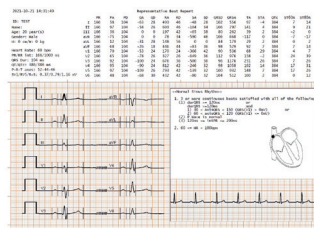

Guide

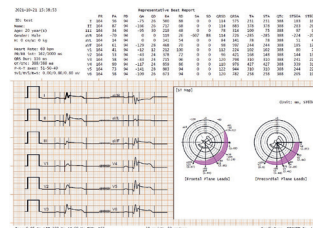


ST map

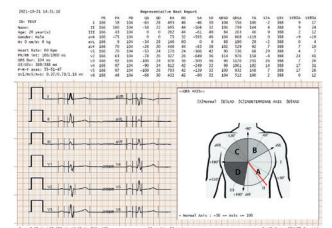

Vector


Compact is Adaptive

- PACS, GDT, 웹 서버, direct EMR
(직접 및 양방향 연결)
- 확장된 데이터 저장 (500 케이스)
- 다양한 표준 파일 형식:
PDF, XML, MFER, BMP, JPG
- PC 사양에 따른 유연한 연결성

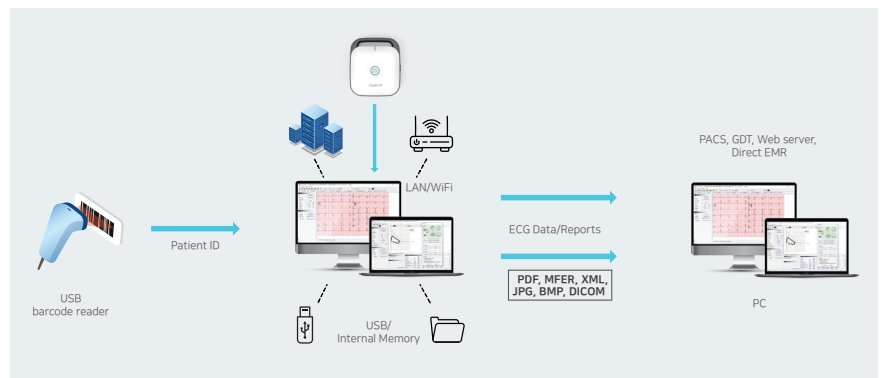

Compact is Secure

- 정보 암호화 통한 사이버 보안
- 사용자별 ID, 비밀번호, 역할 및 권한 부여
- 자동 스탠바이, 종료 기능
- 환자 이름 및 병원 정보 숨기기 기능
- 이벤트 로그

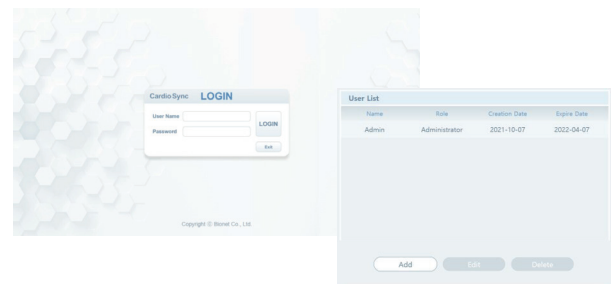

Headquarters
Bionet Co., Ltd.
 서울시 구로구 디지털로31길 61
 드림마크원 데이터센터 5층
 TEL. 02 6292 6410
 E-Mail. domestic.sales@ebionet.com