


FC1400



정확한 태아심박수 & 자궁수축도 측정 'FC1400'

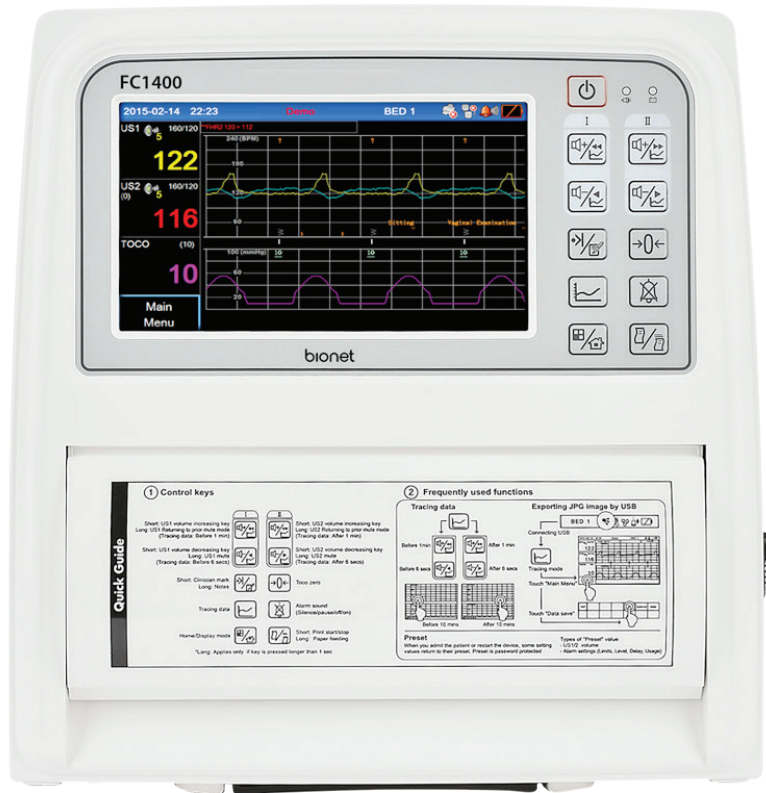

LED 알람 : 장비와 환자 상태를 간편하게
식별할 수 있는 알람 램프 장착



편리한 USB 기능
메모리 저장 및 Wi-Fi 변환기



7" 컬러 TFT LCD(800X480)
정전식 터치 스크린




손쉽게 작동 가능한 스마트 키



경량화 된 프로브 & 견고한 커넥터



즉시 출력 가능

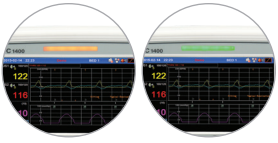



- LED 알람

장비와 환자 상태를 간편하게
식별할 수 있는 알람 램프 장착



- 편리한 USB 기능

메모리 저장 및 Wi-Fi 변환기

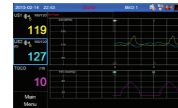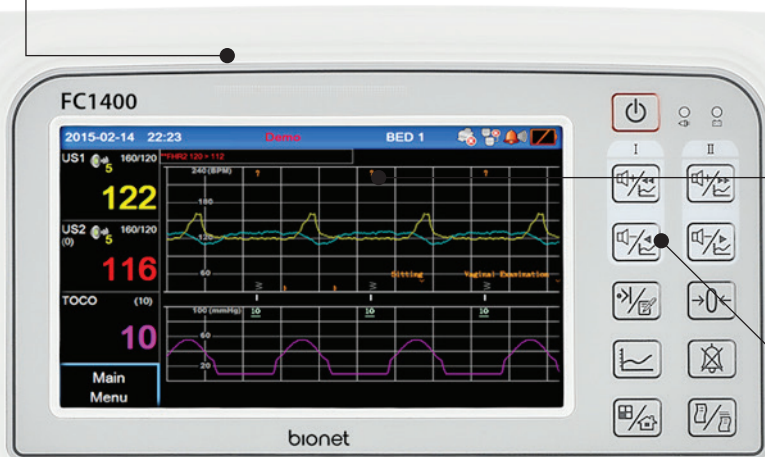

- 7" 컬러 TFT LCD (800 x 480)

- 정전식 터치 스크린




- 직관적인 스마트 키 패널



- 가벼운 프로브 & 견고한 커넥터



- 즉시 출력 가능

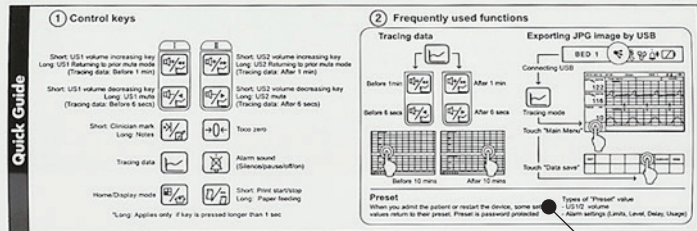

• FC Central 모니터링 시스템

독립적으로 작동하는 확장된 중앙 감시 시스템

FC1400 (분만실)



HIS Server

Nurse Station



FC Central
(Server)

Doctor's Office



FC Central
(Client)


Up to 10 Clients

Up to 16 Devices


2가지 디스플레이 모드

- 그래픽 모드 : 태아상태와 자궁수축도 그래프를 확인할 수 있는 모니터링 모드
- 텍스트 모드 : 멀리서도 태아 상태를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 모니터링 모드

• Graphic Mode


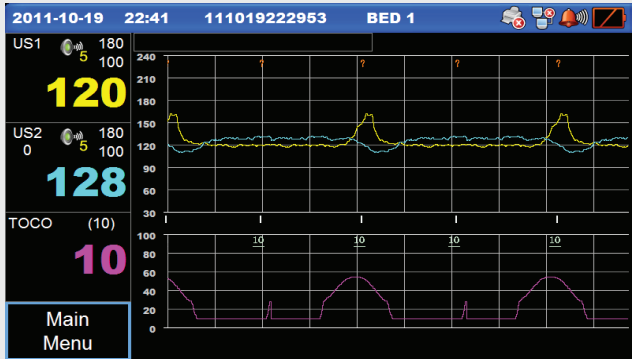


• Text Mode

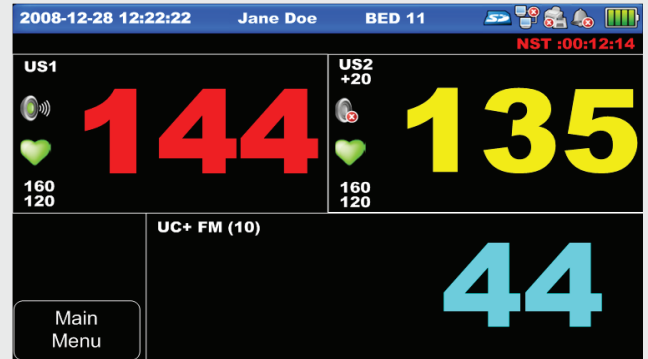



CTG 분석 보고서

- 사용자 편의를 위한 간편한 결과 판독
- 최대 4시간 30분까지 데이터 저장

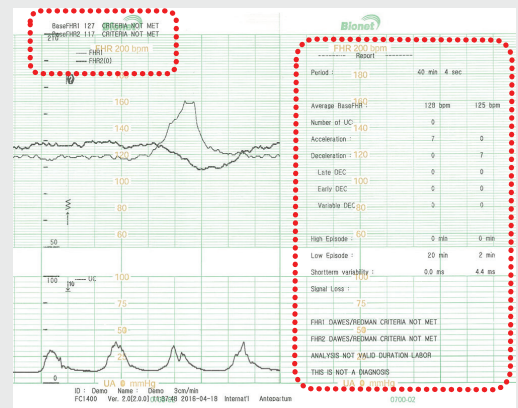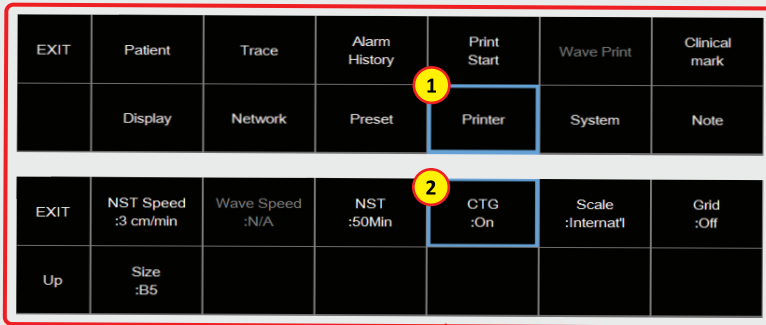

임상마크 및 노트 입력 가능

- 그래프 상에 임상마크 또는 자주 사용되는 기본 문구 입력 가능
- 기본 문구 포함 최대 100개의 노트 저장 & 노트 1개당 최대 40개의 문자 입력 가능

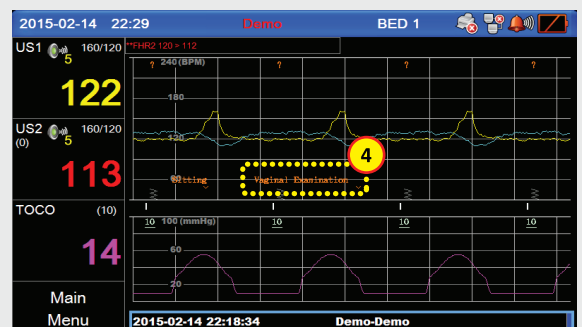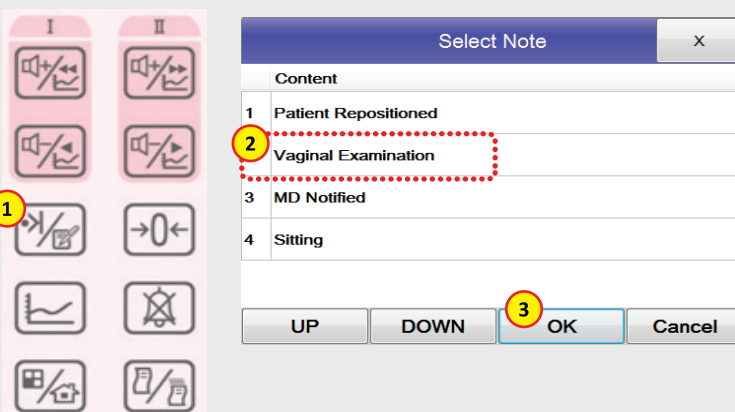

SPECIFICATIONS

Dimensions	296(W) x 305.5(H) x 97.5(D) / (Approx. 2.9 kg)
Display	7" TFT Wide LCD Screen(800 X 480)
Recorder	Method : Thermal Array Print Type : Roll type Print speed : 1,2,3 cm/min(Real time) 30 cm/min(Trace, 2,3 cm/min) 20 cm/min(Trace, 1 cm/min) Paper feeding function
Power	Input : 100 - 240V ~, 1.5 - 0.7 A, 50-60 Hz, / Output : +18V $\pm$ 2.8A
Battery (Option)	Li-ion : 4 hrs (Charging time) 2 hrs (Continuous use time)
External link	LAN, Wi-Fi, USB memory
Fetal Heart Rate	Input Signal : Ultrasound pulsed doppler Ultrasound frequency : 1.0 MHz, 975 KHZ Ultrasound power : <10 mW/cm ² FHR detection method : Autocorrelation FHR range : 50 ~ 210 BPM FHR accuracy : $\pm$ 1 BPM
Uterine Contraction	Input Source : External Transducer with load cell Reference Control : One touch switch, Auto zeroing Measurement range : 0 ~ 99
Fetal Movement Measurement	Detection source : Ultrasound pulsed doppler, event marker
Data Storage	Storage for 72 hrs
Auto CTG Analysis	Average Baseline FHR Number of UC Number of Acceleration Number of Deceleration Late Deceleration Early Deceleration Variable Deceleration High Episode Low Episode Short term variability Signal loss *CTG Analysis results is printed out every 10 min (Intermediate Report)
Accessory (Standard)	Ultrasound doppler probe(2ea), UC probe(1ea), Event marker(1ea), Print paper(2rolls), Power adaptor&cord(each 1ea), Ultrasound gel(1ea), Probe belt(3ea), Operation manual(1ea)
Accessory (Option)	Rechargeable battery(1ea), Stimulator(1ea)

* 바이오넷은 위에 표시된 사양 및 기능을 사전 통지 또는 고지 의무 없이 수정할 수 있습니다.

Bionet reserves the right to modify the design, packaging, specifications, and features shown herein, without prior notice or obligation

* 바이오넷에서 제공하지 않는 약세사리 사용 시에는 정상적인 동작을 하지 않을 수 있습니다. 반드시 바이오넷에서 제공하는 약세사리를 사용하십시오.



Headquarters

Bionet Co., Ltd.

서울시 구로구 디지털로31길 61 5층

TEL. 02 6292 6410

E-Mail. domestic.sales@ebionet.com